

NL HÉT MIDDEL TEGEN SNURKEN EN OM VRIJER TE ADEMEN DOOR UW NEUS

Het gebruik van de Airmax verlicht de neusademhaling en verbetert de luchtstroom met als resultaat:

- Minder problemen bij een 'verstopte' neus (bij verkoudheid, allergie en zwangerschap)
- Minder last van Snurken
- Meer lucht door de neus tijdens het sporten
- Beter uitgerust in de morgen
- Minder behoefte aan neusdruppels

WAAROM DE AIRMAX?

De Airmax is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van 'directe luchtwegverwijders'. De vorm van de Airmax is door luchtstroomexperts ontwikkeld en de werking door KNO-artsen getest. De Airmax verwijdt de neusgang in het gebied van de zogenaamde 'klep'. De Airmax is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof (S.E.B.S.) waardoor het dragen van de Airmax uiterst comfortabel is. De luchtstroom wordt meetbaar vergroot. De functie van de neus namelijk het verwarmen, het reinigen en het bevochtigen van de lucht wordt gehandhaafd of verbeterd.

GEBRUIKSAANWIJZING

De Airmax voor en na gebruik afspoelen met water. Als u de eerste keer de Airmax in de neus plaatst, adviseren wij het gebruik van een spiegel zodat u de Airmax goed kunt plaatsen. De Airmax zit goed als de pootjes de neusgang boven de neusvleugels vervullen en de 'verbindingsbrug' goed aansluit op het neustussenschot, zie de tekening hiernaast.

Als u de Sport Airmax gebruikt, let u er dan op dat de kleine 'haakjes' goed achter de neuspilaar van het neustussenschot zitten, zodat de Airmax er tijdens het sporten niet makkelijk kan uitvallen.

Test eerst welke maat voor u geschikt is. Begin met maat S en plaats deze in de neus zoals hierboven beschreven staat. Probeer daarna maat M. Als bij maat M de 'verbindingsbrug' ook goed aansluit op het neustussenschot kunt u beide maten gebruiken. Als er bij maat M ruimte zit tussen de 'verbindingsbrug' en het neustussenschot, is deze maat te groot voor u en moet u maat S gebruiken.

De Airmax kan gereinigd worden met water en zeep.

De Airmax mag maar door 1 persoon gebruikt worden om besmetting tijdens een eventuele verkoudheid te voorkomen.

Gebruik de Airmax tenminste 2 weken achter elkaar om eraan te wennen.

DE AIRMAX KAN 3 MAANDEN LANG GEBRUIKT WORDEN.

△ WANNEER MOET U DE AIRMAX NIET GEBRUIKEN?

Als u moeilijkheden heeft bij het plaatsen van de Airmax in de neus omdat uw neus niet symmetrisch is of als u na het plaatsen van de Airmax in de neus nog steeds niet beter kunt ademen, adviseren wij u naar een KNO-arts te gaan.

Als door het gebruik van de Airmax bij herhaling irritatie van de huid en het slijmvlies ontstaat, kan het zijn dat dit een allergische reactie op de kunststof is. Tot dusver zijn allergische reacties niet bekend.

△ ATTENTIE!

De Airmax is alleen geschikt voor plaatsing in de neus. De Airmax is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Houd de Airmax uit de buurt van kleine kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.



AIRMAX B.V.
Rhingesterstraatweg 58a
2341 BV Oegstgeest
NEDERLAND



DUTCH DESIGN, MADE IN HOLLAND

US PATENT D 540,462

AM10121-3

GB THE AGENT AGAINST SNORING AND BREATHE MORE FREELY THROUGH YOUR NOSE

Using the Airmax Improves the air flow and nasal respiration with the following results:

- Reduces "stuffed nose" sensation (the common cold, allergies and pregnancy)
- Optimized air flow through the nose reduces snoring
- Optimized air flow through the nose lets you enjoy exercising more
- If you sleep better you wake up more rested!
- Reduced dependency on nose drops

WHY THE AIRMAX?

The Airmax is the latest breakthrough in the field of 'nasal dilators'.

The shape of the Airmax was designed using aerodynamic expertise. The function has been tried and tested by ENT doctors.

Placing the Airmax inside the nose results in the narrowest part of the nasal entrance being widened.

The Airmax is made of a soft, odorless and medically certified plastic (S.E.B.S.) which makes using the Airmax extremely comfortable. The profile of the Airmax works very effectively and increases the air intake.

The function of the nose; warming up, cleaning and moisturizing the air inhaled is maintained or improved.

INSTRUCTIONS FOR USE

The Airmax must be rinsed with water both before and after use. When using the Airmax for the first time, we recommend the use of a mirror to help you position the device symmetrically. The Airmax has been properly positioned when the legs widen the nasal entrance and when the 'connecting bridge' is touching your nasal septum. Please refer to the illustration.

If you use the Airmax Sport, see to it that the small 'barbs' stay behind the nose pillar of the nasal septum. This way the Airmax doesn't drop out when you are working out.

First test both sizes to see which one has the most positive effect on your breathing. Start with size S and proceed as described earlier. Then try size M: If size M and size S both fit you are able to use both sizes. If size M leaves too much space between your nasal septum and the 'connecting bridge', size M is too big for you and you should use size S.

The Airmax can be cleaned with water and soap.

The Airmax can only be used by 1 person to prevent transfer of diseases like the common cold.

Use the Airmax at least 2 weeks in a row to get used to it. Your nose is not used to the shape of the Airmax yet and needs to settle.


THE AIRMAX CAN BE USED FOR UP TO 3 MONTHS!

△ WHEN SHOULD YOU NOT USE THE AIRMAX?

When you have trouble placing the Airmax in your nose because your nose is not symmetrical or after you have placed the Airmax you still don't notice an improvement in breathing, we advise you to see a ENT doctor. If as a result of regularly using the Airmax your skin and mucous membrane become irritated, this could be an allergic reaction to the plastic. To date no allergic reactions are known.

△ ATTENTION!

The Airmax is only suitable for positioning inside the nose. The Airmax is not suitable for children under the age of 12. Keep the Airmax out of reach of younger children to prevent choking.

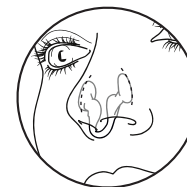

AIRMAX B.V.
Rhingesterstraatweg 58a
2341 BV Oegstgeest
NEDERLAND



DUTCH DESIGN, MADE IN HOLLAND

US PATENT D 540,462

D ATMEN SIE FREIER DURCH DIE NASE UND TUN SIE ETWAS GEGEN DAS SCHNARCHEN!

Airmax erleichtert die Nasenatmung und verbessert damit die Luftzufuhr.

- Sie haben weniger Probleme bei „verstopfter“ Nase
- Sie sind morgens viel besser ausgeschlafen, weil Sie weniger schnarchen
- Sie bekommen mehr Luft durch die Nase bei erhöhter körperlicher Leistung, besonders beim Ausdauersport
- Sie brauchen weniger Nasentropfen, vor allem wenn Sie daran gewöhnt sind!
- Falls Sie einen Schwangerschaftsschnupfen haben, werden Ihre Beschwerden erleichtert

WARUM AIRMAX?

AIRMAX ist die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der so genannten Nasendilatatoren. Seine Wirkungsweise wurde von Strömungsexperten entwickelt und von namhaften HNO-Ärzten getestet. AIRMAX weitet den Naseneingang im Bereich der so genannten „Klappe“ ohne ihn dahinter einzuziehen. Er wird aus einem geruchlosen und medizinisch unbedenklichen Kunststoff (SEBS) hergestellt, der einen erheblichen Tragekomfort gewährleistet. Der nasale Luftstrom wird messbar vergrößert. Die Funktion der Nase, das heißt die Erwärmung der Luft auf Körpertemperatur, die Anfeuchtung der Atemluft und die Reinigung von gröberen Staubpartikeln, wird erhalten oder verbessert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Spülen Sie AIRMAX vor und nach Benutzung mit Wasser. Setzen Sie Airmax – zu Beginn vor dem Spiegel – so in die Nase, dass die Flügel des AIRMAX hinter den Nasenflügeln innen versteckt sind und der Verbindungssteg auf dem Nasensteg aufsitzt. Achten Sie auf symmetrischen Sitz (Sehen Sie die nächste Abbildung). Wenn Sie AIRMAX „Sport“ verwenden, achten Sie bitte darauf, dass die kleinen Häkchen hinter dem Nasensteg platziert sind, damit AIRMAX beim Training nicht herausfallen kann.

Testen Sie mit einer Probierpackung, welche Größe für Sie am besten geeignet ist. Beginnen Sie zunächst mit Größe S. Versuchen Sie danach Größe M. Wenn der Verbindungssteg des AIRMAX bei Größe M auf dem Nasensteg aufsitzt, können Sie beide Größen verwenden. Wenn bei Größe M ein Abstand zwischen Verbindungssteg und Nasensteg besteht, sollten Sie Größe S verwenden.

Reinigen Sie Ihren AIRMAX mit Wasser und Seife!

Benutzen Sie AIRMAX mindestens 2 Wochen hintereinander, um sich daran zu gewöhnen!

AIRMAX darf nur von EINER Person verwendet werden, da sonst die Gefahr einer Keimübertragung besteht.

AIRMAX KANN BIS ZU 3 MONATEN WIEDERVERWENDET WERDEN.

Δ WANN SOLLTEN SIE AIRMAX NICHT VERWENDEN?

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Einsetzen haben, weil Ihre Nase nicht symmetrisch ist oder wenn Sie auch nach dem Einsetzen weiter eine verlegte oder behinderte Nasenatmung haben, sollten Sie einen HNO-Arzt zu Rate ziehen. Wenn Sie bei längerem Gebrauch des Airmax einen Juckreiz und Rötung der Haut am Naseneingang nach dem Einsetzen spüren, könnte es sich um eine Unverträglichkeit gegenüber dem Kunststoff handeln. Derartige Fälle sind bisher nicht bekannt.

Δ ACHTUNG!

AIRMAX eignet sich nur für den Einsatz in der Nase. AIRMAX ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Halten Sie AIRMAX von Kleinkindern wegen der Gefahr des Verschluckens fern!

Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen an
RhinoLab GmbH.
Friedrich-von-Flotow-Str.9
D-24768 Rendsburg
e-mail: info@rhinolab.de



 AIRMAX B.V.
Rhingesterstraatweg 58a
2341 BV Oegstgeest
NEDERLAND



DUTCH DESIGN, MADE IN
HOLLAND
US PATENT D 540,462

airmax®

GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG

